


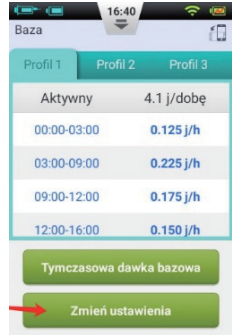
PL

Tytuł:
Errata do polskiej wersji instrukcji używania
1001-PMTL-270.V01

- Wprowadzono następujące zmiany:**
- Dodano w profilach bazy: Funkcję Kopiowanie profilu bazy.
 - Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku wskazujący poziom stężenia glukozy we krwi.
 - Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku w ilości gram węglowodanów, strona 89 IFU.
 - Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w zbiorniku", "niski poziom naładowania baterii", "wyczerpana bateria", „uszkodzony pilot sterujący”.


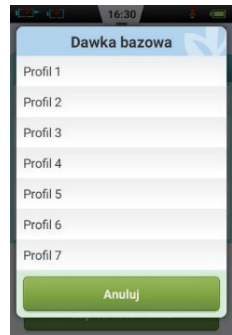
Funkcje dodatkowe:

1 Dodano w profilach bazy: Funkcję Kopiowanie profilu bazy




Naciśnij „Zmień ustawienia”

Kliknij ikonę, aby wybrać, który profil chcesz skopiować



Na przykład wybierz Profil 3



Profil 1 pokaże dane Profilu 3, należy potwierdzić wybór, następnie naciśnij „zmień ustawienia”, skopiuj i nadpisz Program 3 nad 1



ENG

Title:
Errata for the Polish version of the user manual
1001-PMTL-270.V01

- The following changes have been made:**
- Added function for “copy basal rate”.
 - Added a slide bar scale for BG recorder.
 - Added one decimal place in bolus calculator g., page 89 IFU.
 - "low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA defective" such alert will be list in CPU history record.


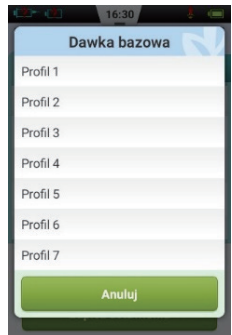
Additional functions to connect and extend:

1 Add function for “copy basal rate”




Click the Zmien ustawienia

Click the icon to choose which profile want to copy from



For example we choose Profil 3



Profil 1 will show Profil 3 data, then Confirmed the chosen copy basal rate program, then press “save setting”, copied and overwrite basal program 3 to program 1

PL

1



2 Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku wskazujący poziom stężenia glukozy we krwi




3 Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku w ilości gram węglowodanów




4 Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w zbiorniku", "niski poziom naładowania baterii", "wyczerpana bateria", „uszkodzony pilot sterujący”.

ENG


1

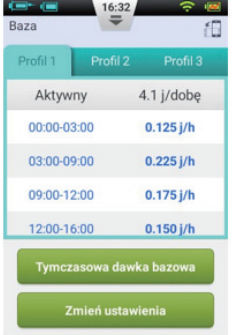

2 Add a slide bar scale for BG recorder



3 Add one decimal place in bolus calculator g.



4 "low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA system controller defective " such alert will be list in CU history record.

1001-PMTL-496.V01

<div></div>	本设计图纸版权归本公司所有， 未经本公司书面同意不得复印。	项目信息		<div>切刀</div> <div>压线</div> <div>开槽</div> <div>半穿</div> <div>粘合</div> <div>备注</div> <div>无印刷</div>	尺寸： 210*280mm，折叠后105*140mm	设计审核		日期
		名称	波兰胰岛素泵IFU修正卡2		印刷颜色： 四色印刷，双面印刷	设计		
	本图纸应与说明，产品状况，产品结构施工图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。	图纸号		材质： 105g铜版纸	审核			
		物料号	1001-PMTL-496					
		版本号	V01					
	图档中所有尺寸比例为1:1。 公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm	版本变更描述		备注： 折叠	批准			
		发放范围	生产（ ） 采购（ ✓ ） 计划（ ✓ ） 其他：				生效日期	

Tytuł:


Errata do polskiej wersji instrukcji używania
1001-PMTL-270.V01

Wprowadzono następujące zmiany:


- Dodano w profilach bazy: Funkcję Kopiowanie profilu bazy.
- Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku wskazujący poziom stężenia glukozy we krwi.
- Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku w ilości gram węglowodanów, strona 89 IFU.
- Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w zbiorniku", "niski poziom naładowania baterii", "wyczerpana bateria", „uszkodzony pilot sterujący”.

Funkcje dodatkowe:**1****Dodano w profilach bazy: Funkcję Kopiowanie profilu bazy**

Naciśnij „Zmień ustawienia”

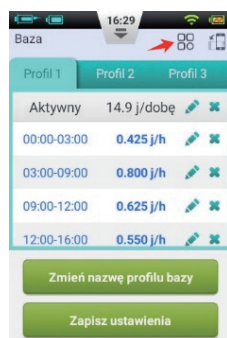

Kliknij ikonę, aby wybrać, który profil chcesz skopiować

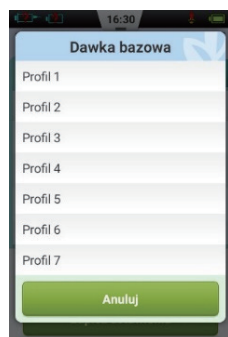

Na przykład wybierz Profil 3



Profil 1 pokaże dane Profilu 3, należy potwierdzić wybór, następnie naciśnij „zmień ustawienia”, skopiuj i nadpisz Program 3 nad 1

**Title:**


Errata for the Polish version of the user manual
1001-PMTL-270.V01

The following changes have been made:

- Added function for “copy basal rate”.
- Added a slide bar scale for BG recorder.
- Added one decimal place in bolus calculator g., page 89 IFU.
- "low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA defective" such alert will be list in CPU history record.

Additional functions to connect and extend:**1****Add function for “copy basal rate”**

Click the Zmien ustawienia

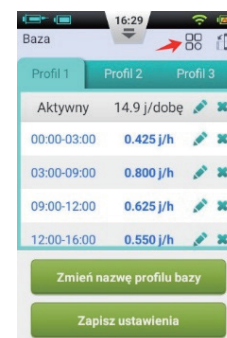

Click the icon to choose which profile want to copy from




For example we choose Profil 3



Profil 1 will show Profil 3 data, then Confirmed the chosen copy basal rate program, then press “save setting”, copied and overwrite basal program 3 to program 1



1

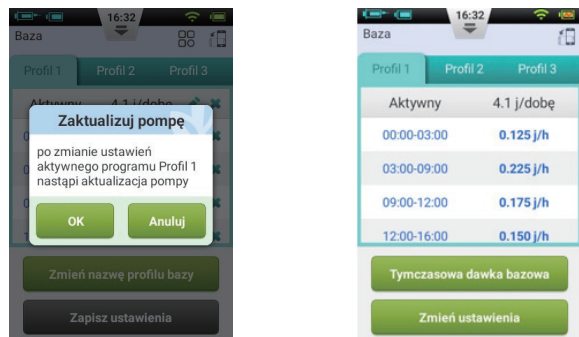

2

Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku wskazujący poziom stężenia glukozy we krwi



3


Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku w ilości gram węglowodanów



4


Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w zbiorniku", "niski poziom naładowania baterii", "wyczerpana bateria", „uszkodzony pilot sterujący”.

1

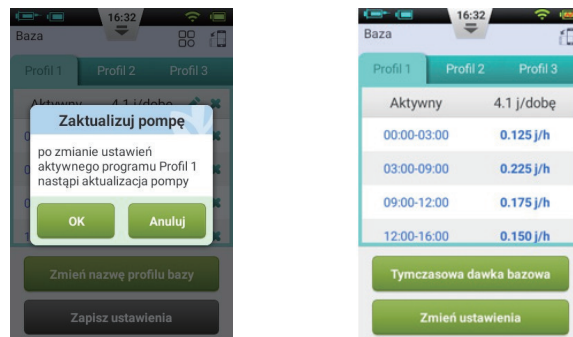

2

Add a slide bar scale for BG recorder

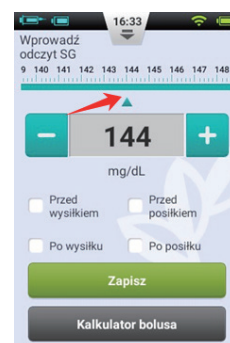

3

Add one decimal place in bolus calculator g.



4

"low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA system controller defective " such alert will be list in CU history record.