

DREN Z TĘPYM TROKAREM



Dreny wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCW. Wszystkie posiadają linię kontrastującą w promieniach RTG. Otwory drenażowe mają gładkie, atraumatyczne krawędzie. Dreny charakteryzuje najwyższa jakość wykonania - typowa dla wszystkich produktów firmy Portex. Oznaczenia rozmiaru na drenie, łączniku i trokarze.

DREN:

- Dreny odporne za załamanie, gładkie PCV
- Linia widoczna w promieniach Rtg
- Zaoblony koniec
- Gładko wykończone otwory
- Znaczniki głębokości co 2 cm
- Integralny łącznik schodkowy
- Szeroki zakres rozmiarów
- Opakowanie zawiera osłonę na zakończenie trokara

TROKAR:

- Tępy gładki koniec
- Płaski uchwyt ułatwiający wprowadzenie

Miękki	Standardowy	Rozmiar	Długość
200/801/080	—	8F	89 mm
200/801/100	—	10F	215 mm
200/801/120	—	12F	215 mm
200/801/160	200/803/160	16F	230 mm
200/801/200	200/803/200	20F	390 mm
200/801/240	200/803/240	24F	390 mm
200/801/280	200/803/280	28F	390 mm
200/801/320	200/803/320	32F	390 mm

Dostarczane sterylne pakiowane w kartonach po 10 sztuk.

AKME

02-676 Warszawa ul. Postępu 1 tel:022 853-50-69, -70, -72 fax: 022 853-50-71
akme@akme.com.pl www.akme.com.pl

DRENY THORAX

śródooperacyjne proste i wygięte



Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

- Dreny wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCV
- Otwory boczne i otwarty koniec gładko atraumatycznie wykończone
 - Posiadające atraumatyczny uchwyt do kleszczy (peana)
- Posiadają linię kontrastującą w promieniach Rtg na całej długości
 - Znaczniki głębokości co 2 cm
 - Długość 50 cm
 - Sterylne pakowane

Nr katalogowy		Średnica
Wygięty o 90°	Prosty	
20916	21016	16 Ch
20920	21020	20 Ch
20924	21024	24 Ch
20928	21028	28 Ch
20930	21030	30 Ch
20932	21032	32 Ch
20936	21036	36 Ch
20940	21040	40 Ch

*Sterylnie pakowane w kartonach po 10szt.

DRENY Z TROKAREM

z zamkniętym końcem i tępym trokarem




- Wykonane z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania PCV
 - Dostępne w wersji z tępym trokarem atraumatycznie zakończonym
 - Otwory ssące gładko wykończone
 - Oznaczenie rozmiaru na drenie
 - Zintegrowany łącznik schodkowy
 - Niebieska linia widoczna w RTG
 - Znaczniki głębokości co 2cm
- Sterylnie, pakowane w podwójne opakowanie w kartonach po 10 szt.

Numer katalogowy	Rozmiar	Długość
21108	8 Ch	22 cm
21110	10 Ch	22 cm
21112	12 Ch	25 cm
21116	16 Ch	25 cm
21118	18 Ch	25 cm
21120	20 Ch	40 cm
21124	24 Ch	40 cm
21128	28 Ch	40 cm
21132	32 Ch	40 cm

*Sterylnie pakowane w kartonach po 10szt.

Zestaw UNICO[®] z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej

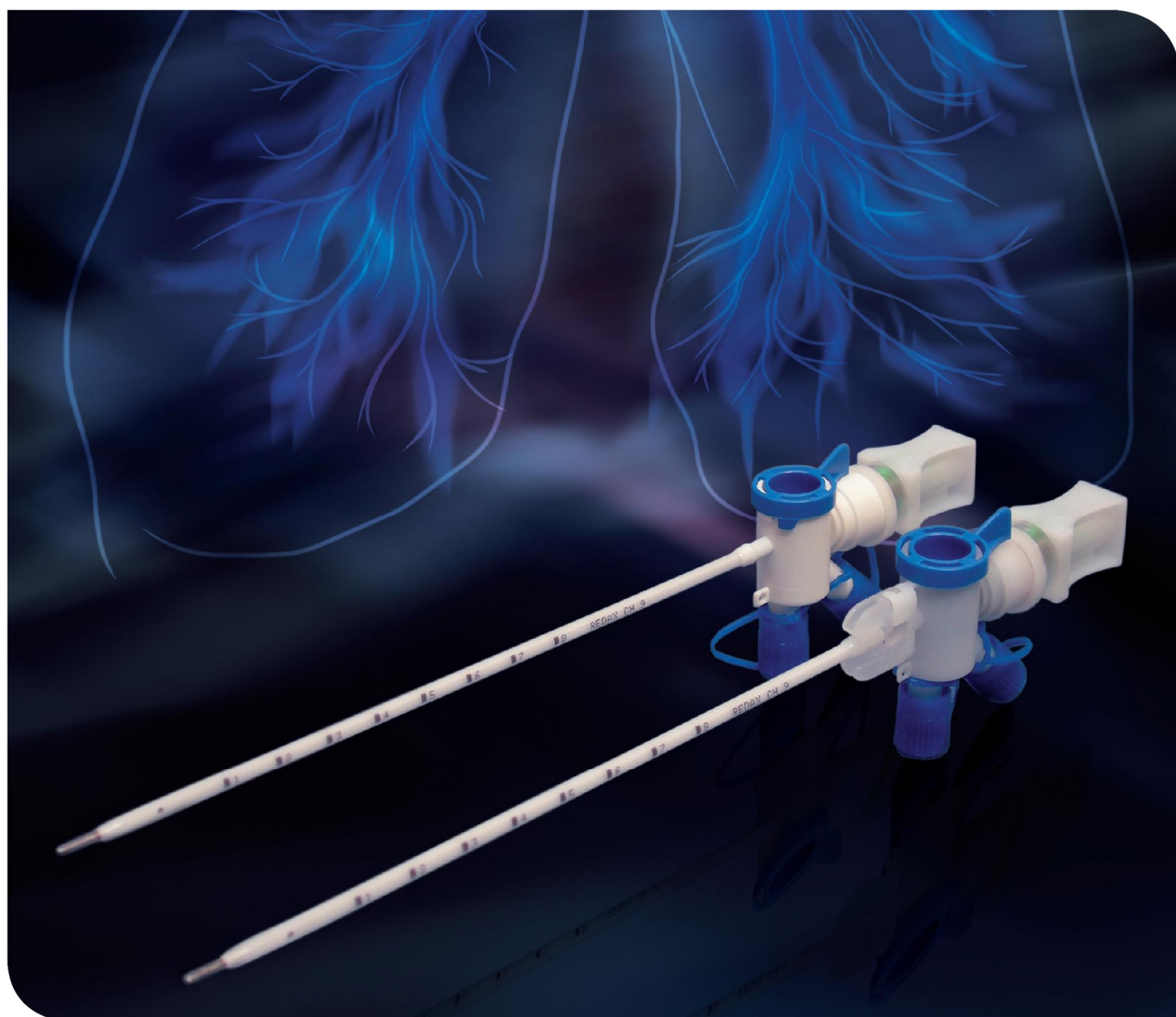

AKME


02-676 Warszawa ul. Postępu 1 tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl www.akme.com.pl

Sterylny, jednorazowego użytku **zestaw UNICO®** umożliwia bezpieczny przezskórny dostęp do jamy opłucnej, dzięki zastosowaniu igły Veressa w przewodniku. Zestaw ten umożliwia również dostęp do otrzewnej i worka osierdziowego. Zestaw UNICO® przeznaczony jest do drenażu w przypadku odmy opłucnowej i/lub wysięku.

Zestaw UNICO® posiada wbudowaną zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą pacjenta przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu. Wbudowane łączniki i zawór pozwalają na obejście zastawki i umożliwiają drenaż na wiele sposobów, takich jak grawitacyjny do worka drenażowego, za pomocą podłączenia mieszków niskociśnieniowych, w oparciu o zasadę pompy ssąco-tłoczącej, bądź poprzez podłączenie do zestawu drenażowego

Poliuretanowy cewnik **zestawu UNICO®** jest odporny na odkształcenia oraz zmniejsza ryzyko zamknięcia światła. Dostępny jest w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch i pozwala na efektywny drenaż, w przypadku cewnika 12Ch również drenaż krwi

Zestaw UNICO® umożliwia zmianę położenia cewnika dzięki specjalnemu dostosowanemu do cewnika, tępo zakończonemu trokarowi. Linia przedłużająca, dostępna w wersji rozszerzonej, zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

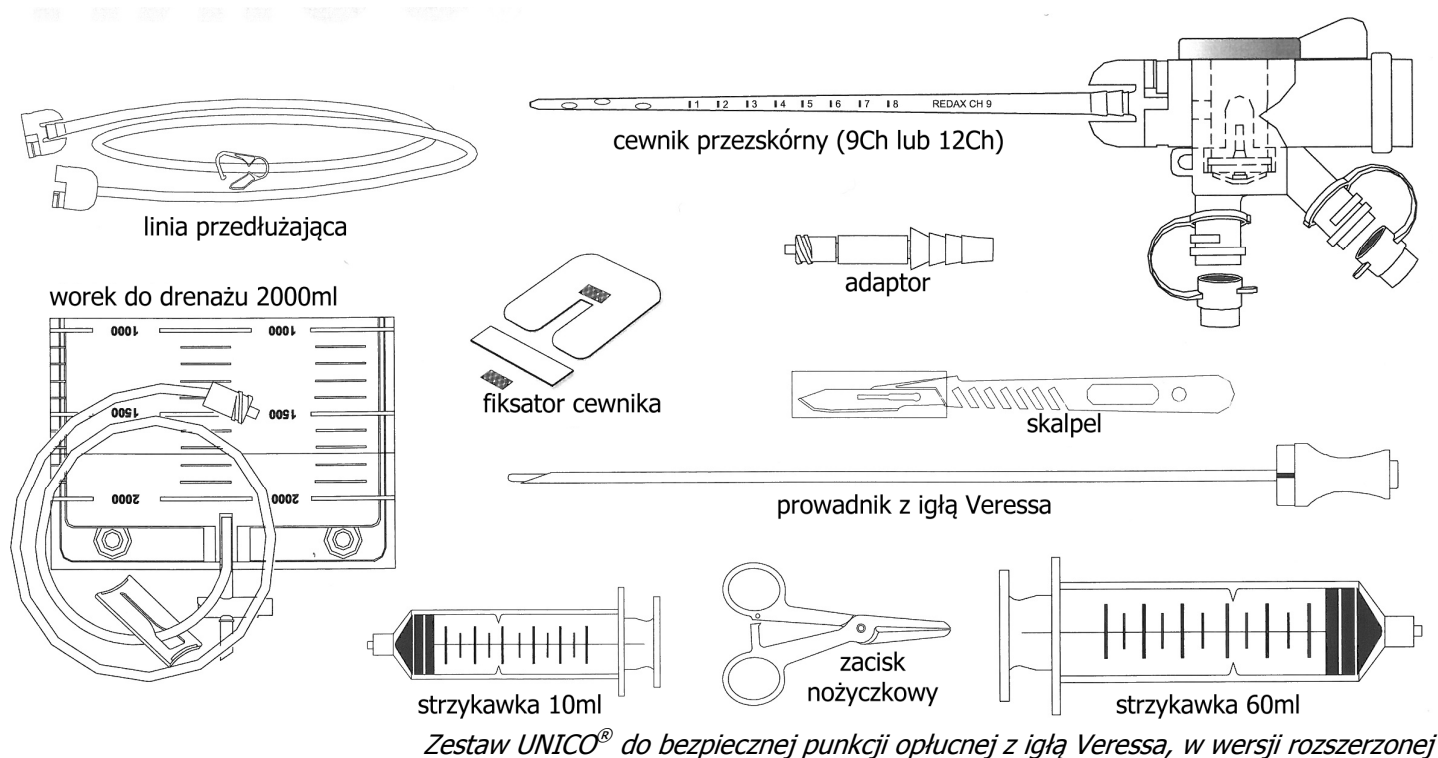


CECHY I ZALETY ZESTAWU UNICO®


- Łatwy w obsłudze oraz w pełni bezpieczny, dzięki zastosowaniu **igły Veressa i bezzwrotnych zastawek**.
- Cewnik dostępny w rozmiarze 9Ch i 12Ch **co umożliwia także drenaż krwi**.
- Cewnik wykonany z **poliuretanu** zmniejszający ryzyko załamania i okluzji.
- Łatwe i bezpieczne **re-pozycjonowanie** cewnika w ciele pacjenta.
- Unikalna **linia przedłużająca cewnik** zwiększająca komfort pacjenta i zmniejszająca ryzyko powikłań (ból, martwica, zakażenie) oraz
- Linia przedłużająca cewnik ułatwia opiekę personelu medycznego nad pacjentem.
- Możliwość pomiaru przecieku.
- Możliwość podłączenia różnych systemów drenażowych.
- Wskazany także w przypadku paracentezy i periokardiocentezy.

Skrócony opis zastosowania zestawu UNICO®


(przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika)

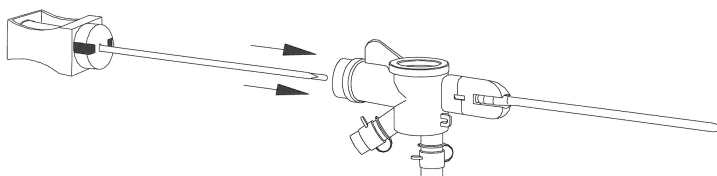


- 1.** Włożyć prowadnik z igłą Veressa, do tylnego portu w cewniku przezskórnym.

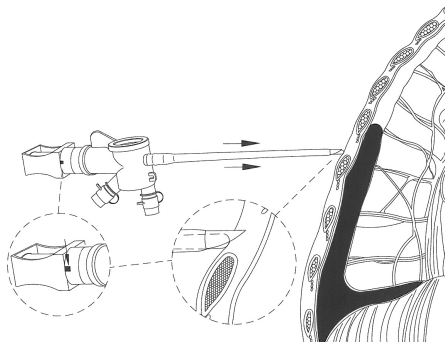


- 2.** Podczas wprowadzania, zielony wskaźnik prowadnika igły Veressa, napotykając na opór, schowa się. W celu ułatwienia wprowadzenia można naciąć skórę skalpelem.

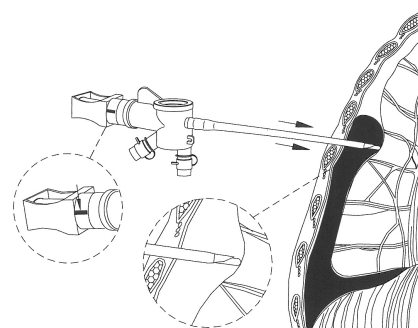


- 3.** W momencie gdy cewnik znajdzie się w jamie opłucnej, zielony wskaźnik wysunie się. Ponowne jego zniknięcie zasygnalizuje zbyt głębokie wprowadzenie.

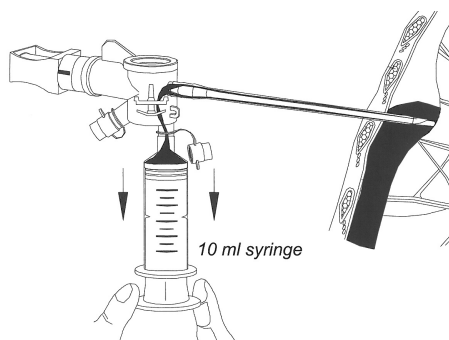


- 4.** W celu potwierdzenia prawidłowego położenia cewnika w jamie opłucnej należy użyć strzykawki 10ml, poprzez zaaspirowanie niewielkiej ilości płynu.

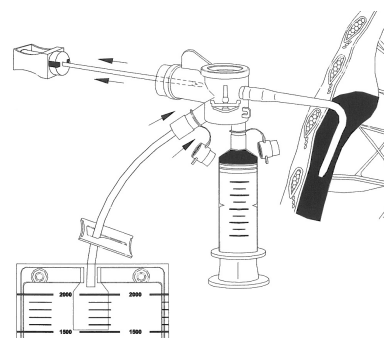


- 5.** Po uzyskaniu ostatecznego położenia cewnika, można bezpiecznie usunąć prowadnik, dzięki zintegrowanej z cewnikiem zastawce przeciwwrotnej.

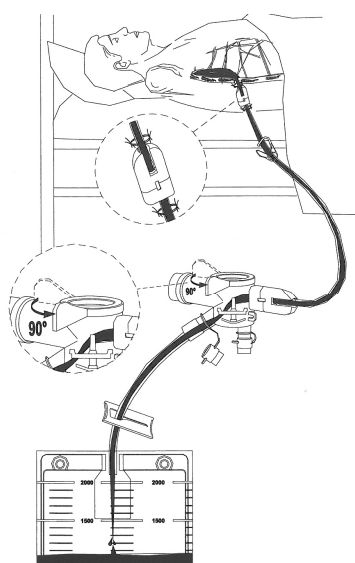

- 6.** Linia przedłużająca umożliwia lepszą kontrolę drenażu, minimalizuje ilość powikłań pooperacyjnych oraz znacząco zwiększa komfort pacjenta.

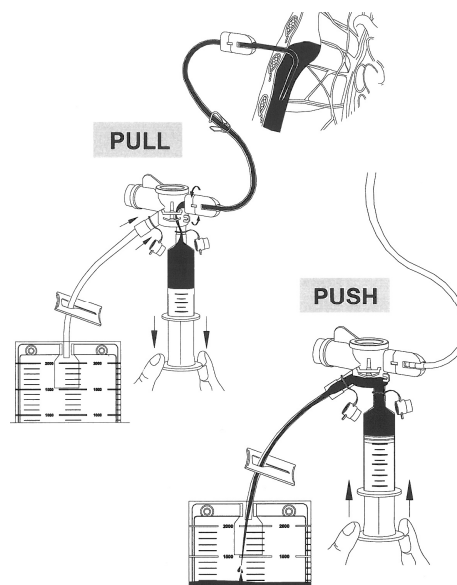

- 7.** Dzięki zastosowaniu zastawki przeciwwrotnej, można przeprowadzać drenaż płynu z opłucnej przy użyciu strzykawki na zasadzie pompy ssąco-tłoczącej.

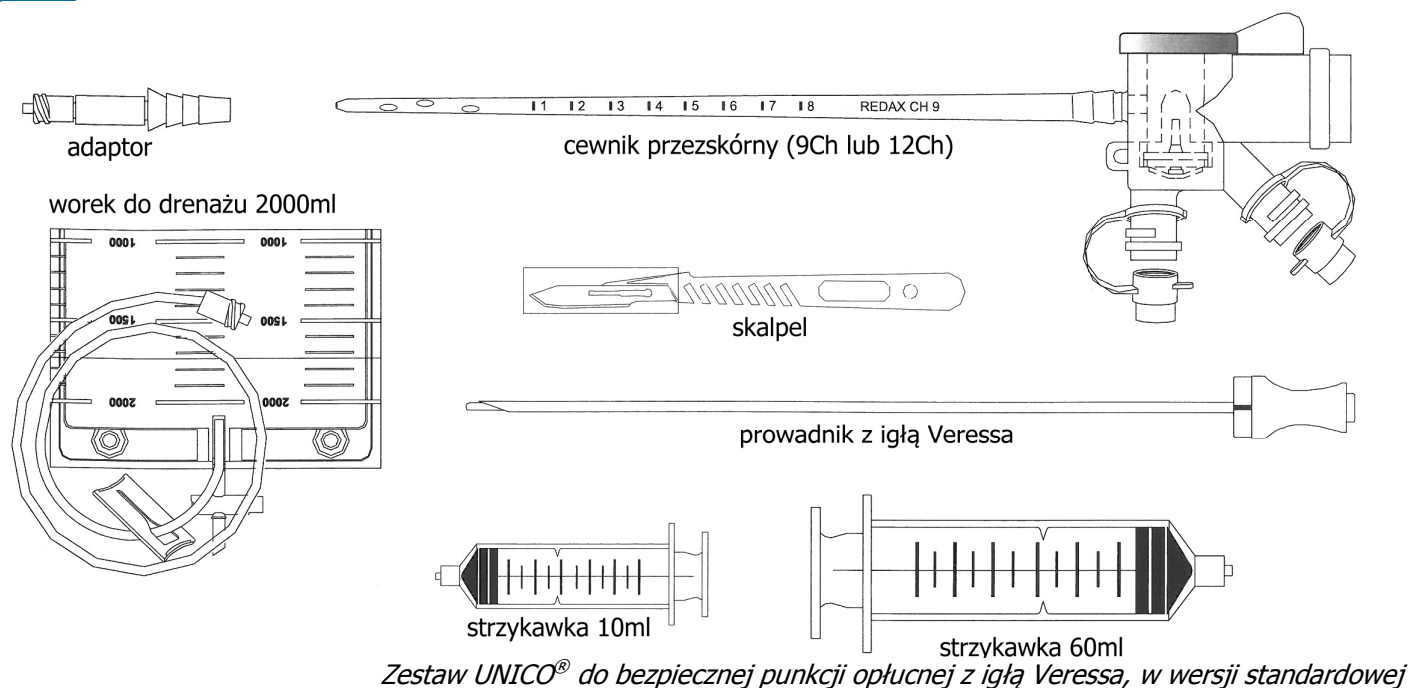

Skład zestawu UNICO® w wersji standardowej

- cewnik przezskórny (9F lub 12F)
- przewodnik z igłą Veressa
- skalpel
- strzykawka 10 ml
- strzykawka 60 ml
- worek do drenażu o pojemności 2000ml
- adaptor luer-lock/schodkowy

W skład zestawu UNICO® w wersji rozszerzonej dodatkowo wchodzi:

- linia przedłużająca cewnik przezskórny (do długotrwałego drenażu rany)
- zacisk nożyczkowy
- fixator cewnika przezskórnego

Dodatkowe akcesoria do zestawu UNICO®:

- bezpieczny tępo zakończony trokar do zmiany położenia cewnika w ciele pacjenta
- silikonowy worek umożliwiający monitorowanie przecieku od pacjenta

Numer katalogowy	Nazwa
10800	Zestaw UNICO® z igłą Veressa, do bezpiecznej punkcji opłucnej, z drenem 9Ch, w wersji standardowej
10801	Zestaw UNICO® z igłą Veressa, do bezpiecznej punkcji opłucnej, z drenem 12Ch, w wersji standardowej
10802	Zestaw UNICO® z igłą Veressa, do bezpiecznej punkcji opłucnej, z drenem 9Ch, w wersji rozszerzonej
10803	Zestaw UNICO® z igłą Veressa, do bezpiecznej punkcji opłucnej, z drenem 12Ch, w wersji rozszerzonej
10809	Tępo zakończony trokar do zmiany położenia cewnika 9Ch
10811	Tępo zakończony trokar do zmiany położenia cewnika 12Ch
10808	Silikonowy worek 100ml (średnie podciśnienie 20cmH ₂ O)
12019	Dodatkowy worek 2000ml do zestawu UNICO®