

7.2 Lista opcji i akcesoriów



Uwaga: Niektóre poniższe elementy mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z dystrybutorem Air Liquide Medical Systems, aby uzyskać więcej informacji.

Oznaczenie	Nr kat.
Kapnografia	
Oprogramowanie EtCO ₂	KA010700
Czujnik CO ₂ IRMA™	KB020400
Do użytku jednorazowego	Adaptery CO ₂ IRMA™ x25 (dorosły/dziecko)
	Adaptery CO ₂ IRMA™ x10 (niemowlę/novorodek)

Dodatkowa opcja wentylacji i monitorowania	
Funkcja trybu Duo-Levels	KA012300
P/V, D/P, D/V and V/CO ₂ loops	KA012400
Tryb SIMV/PSIMV-NIV	KA014900
Tryb PS-Pro	KA015000
Tryb PRVC	KA015100
Zestaw trybów SIMV / PS-Pro / PRVC / Duo-Levels	KA015200
CPV – Cardio-Pulmonary Ventilation	KA015700

Zespoły wydechowe		
Do użytku jednorazowego	Zastawka wydechowa Monnal Eva x5 (korpus zastawki i membrana)	KY694800
	Zastawka wydechowa Monnal Eva x20 (korpus zastawki i membrana)	KY694900
	Czujnik przepływu wydechowego x5	KY664500
	Czujnik przepływu wydechowego x20	KY664600
Z możliwością dezynfekcji w autoklawie	Zastawka wydechowa Monnal Eva x1 (korpus zastawki i membrana)	KY694500
	Czujnik przepływu wydechowego x1	KY632200
Do użytku jednorazowego	Membrana x5 (do zaworu autoklawowalnego KY694500)	KY665300

Obwody pacjenta i powiązane akcesoria		
Do użytku jednorazowego	Dwuramienny obwód pacjenta dorosłego o gładkiej powierzchni wewnętrznej x20 1,6 m Ø22 (bez skraplacza)	KG020100

Ponowny montaż

Zamontować zespół wydechowy, używając rękawic: umieścić nową membranę w obudowie zastawki.




Ostrzeżenie: Każdorazowo po ponownym zmontowaniu zastawki wydechowej i czujnika przepływu konieczne jest przeprowadzenie testu automatycznego.





Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż zestawu wydechowego (niepoprawne ustawienie membrany w obudowie zastawki, wyjęcie lub dodanie dodatkowego krążka silikonowego itp.) może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia (ryzyko wycieków, nieprawidłowego ciśnienia, nieprzestrzeganie ustawionej objętości – hipowentylacja).

10.3.1 Zespół wydechowy do sterylizacji w autoklawie Monnal EVA

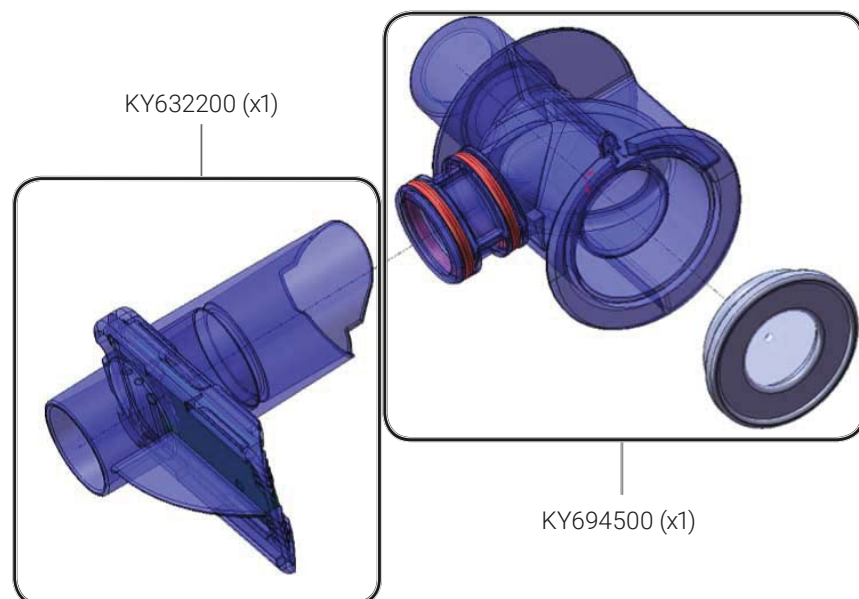

10.3.2 Zespół wydechowy jednorazowego użytku Monnal EVA

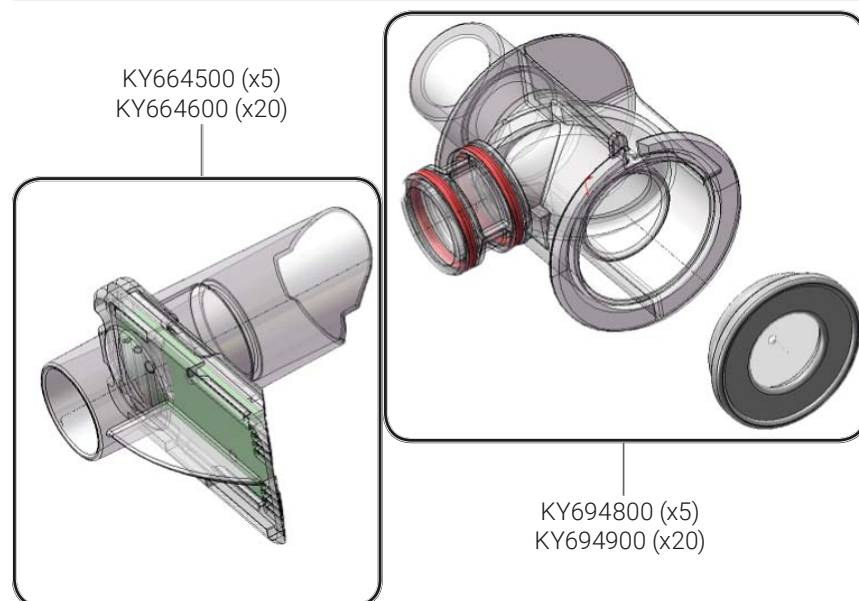


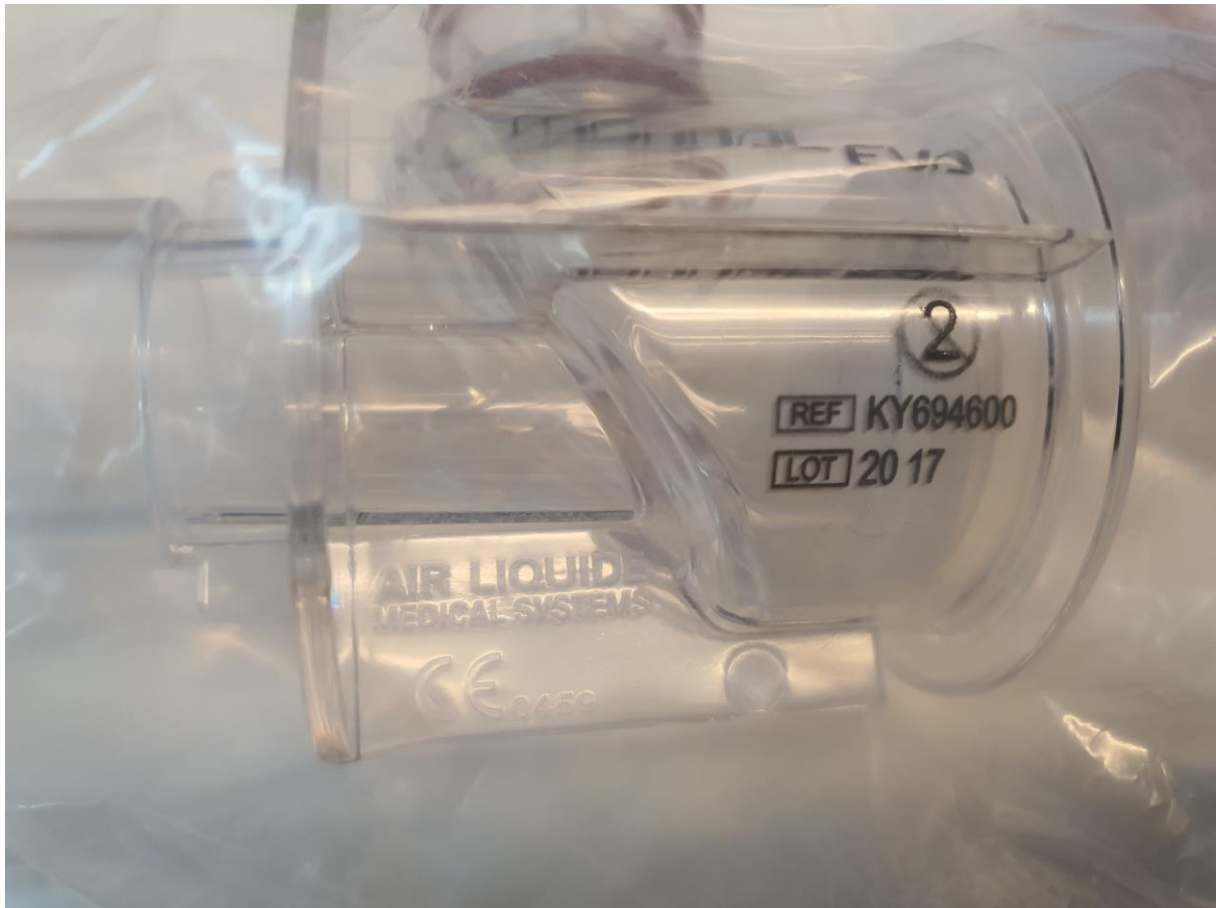

Air Liquide HEALTHCARE

REF KY694900

LOT 2024

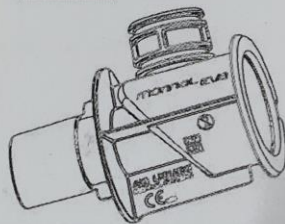

QTE 1

FR VALVE EXPIRATOIRE
USAGE UNIQUE POUR MONNAL EVA
AVEC MEMBRANE (x20)



EN SINGLE USE EXPIRATORY VALVE
FOR MONNAL EVA
WITH MEMBRANE (x20)

IT VALVOLA ESPIRATORIA MONOUSO
PER MONNAL EVA
CON MEMBRANA (x20)



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6 rue Georges Besse
92182 ANTONY CEDEX FRANCE



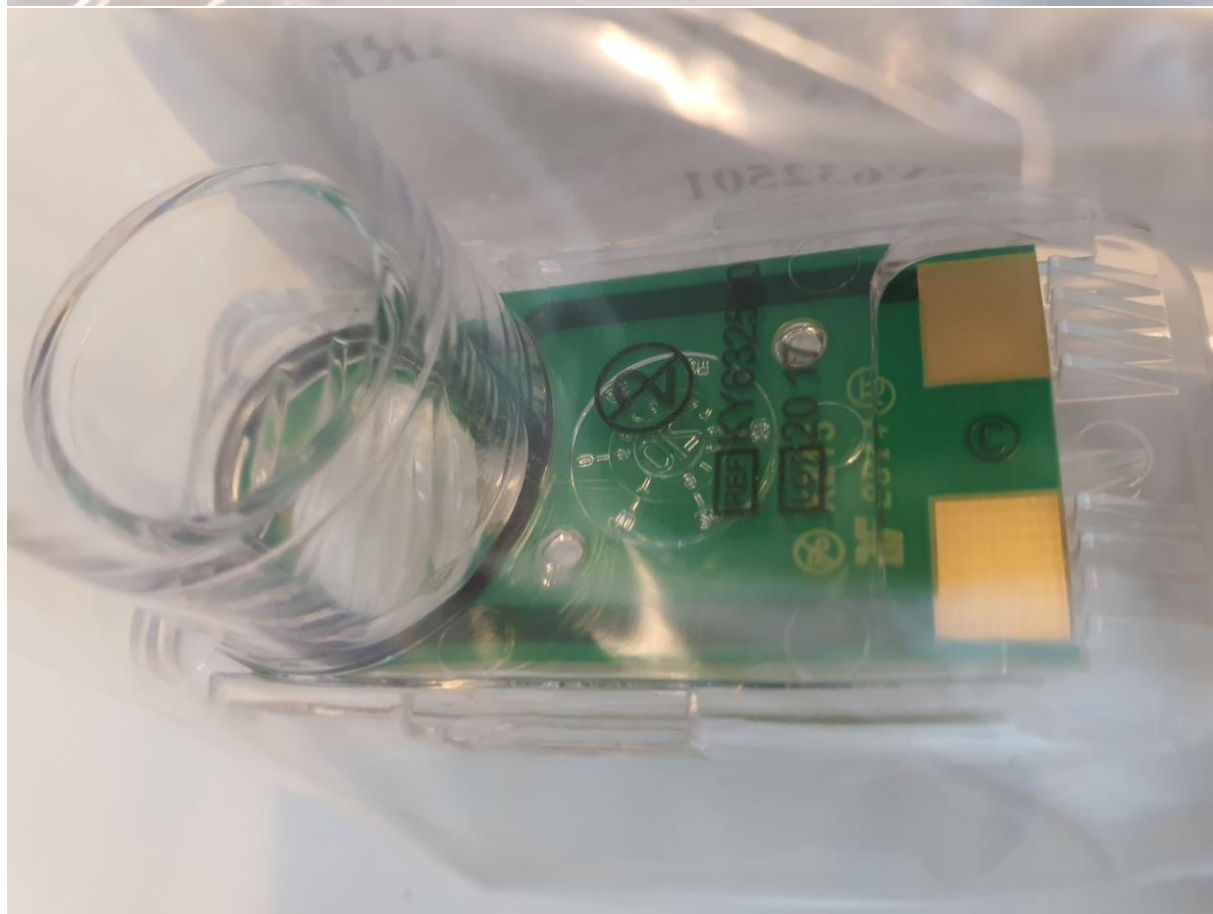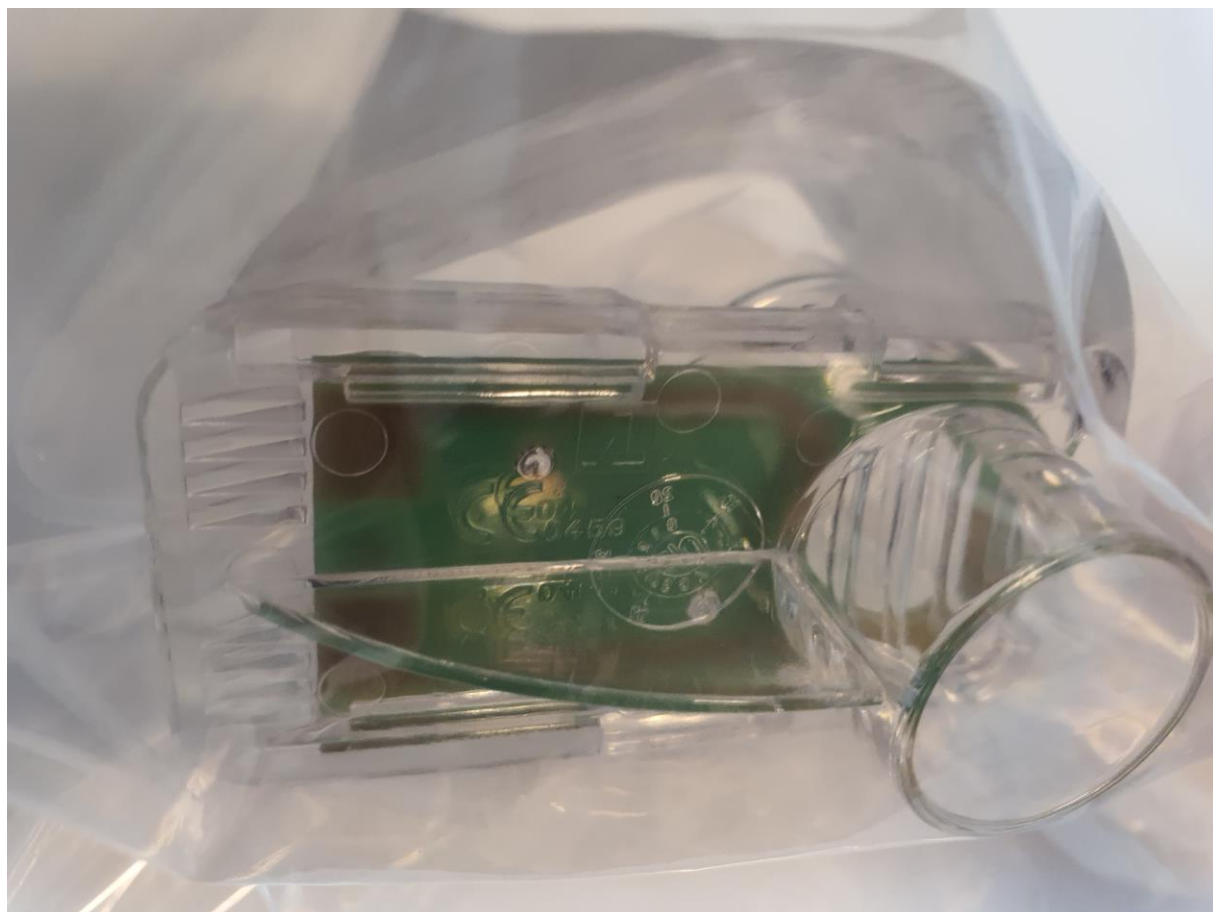


Air Liquide


HEALTHCARE

REF KY664600

LOT 2023

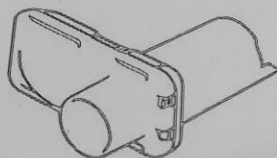

QTE 1

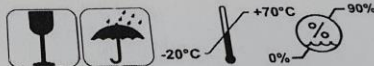

FR CAPTEUR DE DEBIT EXPIRATOIRE
USAGE UNIQUE POUR MONNAL EVA (x20)

EN SINGLE USE EXPIRATORY FLOW
SENSOR FOR MONNAL EVA (x20)

IT SENSORE DI FLUSSO ESPIRATORIO
MONOUSO PER MONNAL EVA (x20)



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6 rue Georges Besse
92182 ANTONY CEDEX FRANCE



CE 0459

