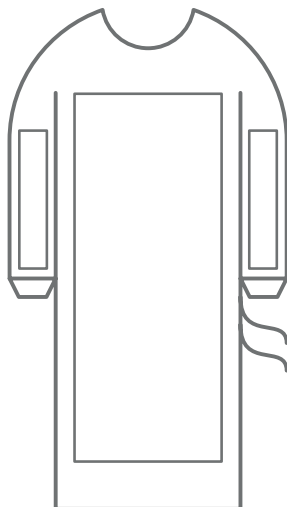


## OPERO Fartuch chirurgiczny włókninowy SMMMS – wzmacniany, jałowy

**materiał:**

włóknina polipropylenowa SMMMS 35g/m<sup>2</sup>, wewnętrzny laminat PP+PE (polipropylen + polietylen) 40 g/m<sup>2</sup>

**dostępne kolory:**

ciemnoniebieski

**dostępne rozmiary:**

M, L, XL, XXL, XXXL

**sposób pakowania:**

opakowanie jednostkowe: papie-folia – 1szt.

opakowanie pośrednie: worek foliowy – 25szt.

opakowanie zbiorcze: karton - 50szt.

**opis produktu:**

- fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej SMMMS z białym wzmocnieniem na wysokości klatki piersiowej oraz  $\frac{3}{4}$  rękawów (klejone na całym obwodzie)
- jednorazowy, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu
- elementy fartucha zgrzewane ultradźwiękowo, szew czterościeżkowy
- zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na dwie pary troków (wiązanie na czysto i na brudno)
- fartuch składany „book folded” a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania
- rękaw typu raglan (poszerzone wszycie) zakończony min. 7 cm dzianym poliestrowym mankietem
- tylne części fartucha zachodzą na siebie zapewniając sterylne plecy operatora
- biała lamówka przy szyi
- 4 szt. troków 65 x 4 cm, wzmacniane szwem ultradźwiękowym
- wszywka z oznaczeniem rozmiaru
- kodowanie kolorystyczne rozmiaru za pomocą kolorowego owinięcia
- pakowany razem z 2 ręcznikami z włókniny typu Spunlace 30 x 40 cm

- zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 1cm	+/- 2cm	+/- 1cm

-zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową z zaznaczonym kierunkiem otwierania, posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji

**klasyfikacja produktu:**

Klasa I sterylna, zgodny z normą EN 13795-1:2019, EN ISO 11135-1:2007 i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42

**deklaracja zgodności CE  
producent:**

Jiangsu MedPlus Non-woven Manufacturer Co. Ltd.

**instrukcja użytkowania i  
przechowywania:**

-wyjąć fartuch z opakowania, rozłożyć, założyć w sposób zapewniający zachowanie jałowości, zapiąć rzep na szyi oraz zawiązać troki w pasie w sposób jałowy  
-produkt jednorazowego użycia  
-zalecane jest przechowywanie w suchym miejscu, chronienie przed oddziaływaniem światła słonecznego i fluorescencyjnego  
-nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów  
-gwarancja jakości: 5 lat

**nr. referencyjne:**

M: W219100030\_2080  
L: W219100040\_2080  
XL: W219100050\_2080  
XXL: W219100060\_2080  
XXXL: W219100070\_2080