

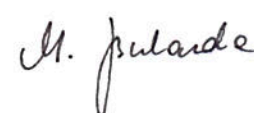
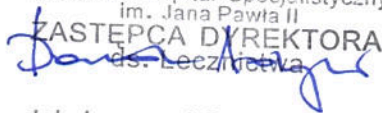
 <b>KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II</b>	<b>INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO</b>	 <b>MAŁOPOLSKA</b>	<b>Numer procedury</b> PO/LE/0121/2.6/2018
<b>ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH</b>			<b>Obowiązuje od:</b> 28.11.2018
			<b>Edycja nr:</b> 6
			<b>Ilość stron:</b> 3
			<b>Ilość załączników:</b> -
<p align="center"><b>Procedura postępowania po użyciu ssaka.</b></p>			

<b>Opracował:</b> Imię i Nazwisko:  Specjalista ds. epidemiologii Mgr Edyta Synowiec  Data i Podpis:  17. PAŹ. 2018	<b>Sprawdził:</b> Imię i Nazwisko:  Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda  Data i Podpis:  18. PAŹ. 2018	<b>Zatwierdził do stosowania:</b> Imię i Nazwisko:  Z-ca dyrektora ds. leczenia Dr hab. med. Dorota Sobczyk  Data i Podpis:  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Lecznictwa dr hab. n. med. Dorota Sobczyk 27. LIS. 2018
<b>Cel</b>	Zapobieganie transmisji zakażeń szpitalnych	
<b>Obszar stosowania</b>	Oddziały szpitalne  Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II	
<b>Osoba odpowiedzialna za nadzór nad procedurą:</b>	Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,	

## Spis treści:

1. Cel
2. Przedmiot i zakres stosowania
3. Definicje
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
5. Opis postępowania
6. Dokumenty związane

### 1. Cel

Zapobieganie transmisji egzogennych zakażeń szpitalnych

### 2. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej procedury są szczegółowe zasady postępowania z ssakami po użyciu w oddziałach szpitalnych

### 3. Definicje

- Dezynfekcja – proces w wyniku, którego ulegają zniszczeniu, zabiciu lub inaktywacji formy wegetatywne bakterii metodami fizycznymi lub chemicznymi do poziomu, który nie zagraża zdrowiu człowieka.

### 4. Odpowiedzialność i uprawnienia

- Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych – nadzór,
- Personel pielęgniarstwa i pomocniczy – prawidłowa realizacja w praktyce,

### 5. Opis postępowania

#### 5.1 POSTĘPOWANIE Z SSAKAMI WYPOSAŻONYMI W JEDNORAZOWE WKŁADY:


- 5.1.1 Przed przystąpieniem do pracy wykonać dezynfekcję rąk według obowiązującej procedury.
- 5.1.2 Zastosować środki ochrony osobistej: rękawice, maski, okulary, fartuch foliowy.
- 5.1.3 Ssak po użyciu należy rozmontować.
- 5.1.4 Dreny usunąć do pojemnika na odpady szpitalne,
- 5.1.5 Jednorazowy wkład używany podczas pracy ssaka usunąć do pojemnika na odpady szpitalne.
- 5.1.6 Pojemnik ssaka należy przesać do Centralnej Sterylizacji w specjalnym pojemniku transportowym celem wykonania dekontaminacji / dezynfekcji maszynowej,
- 5.1.7 Po zakończonym procesie dezynfekcji sprzęt dokładnie wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.
- 5.1.8 Elementy obudowy ssaka przetrzeć preparatem na bazie alkoholu zgodnie z Planem Higieny.
- 5.1.9 Czysty i suchy ssak przygotować do użycia.

### 6. Dokumenty związane:

- Plan Higieny,
- Procedura higieny rąk,
- Procedura zarządzania odpadami,



**Wykaz przeglądów aktualności oraz wprowadzonych zmian w dokumencie:**  
Procedura postępowania po użyciu ssaka.

Data przeglądu/ zmiany	Nr dokumentu/ Edycja (po ew. zmianie)	Adnotacja o dokonaniu przeglądu/ Opis ew. zmiany	Czytelny podpis
18-10-2018	PO/LE/0121/2.6/2018 Edycja 6	- zmiana systemu dekontaminacji - zmiana szaty graficznej	
20-10-2021	PO/LE/0121/2.6/2018 Edycja 6	Sprawdzono pod względem merytorycznym. Nie wymaga zmiany.	