

**FUJIFILM**

Endoskop  
**EB-580T**

---

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
(przygotowanie i obsługa)

---

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby uniknąć nieoczekiwanych wypadków oraz w pełni wykorzystać możliwości produktu.




### 4.3 Przyciski obsługi zdalnej

#### ④ Przycisk zapisywania

Jest to przycisk zdalny do przechwytywania obrazów dla drukarki wideo.

Przycisk ten umożliwia przechwytywanie obrazów także wtedy, gdy aktywowano zatrzymanie obrazu przyciskiem zamrożenia (freeze).

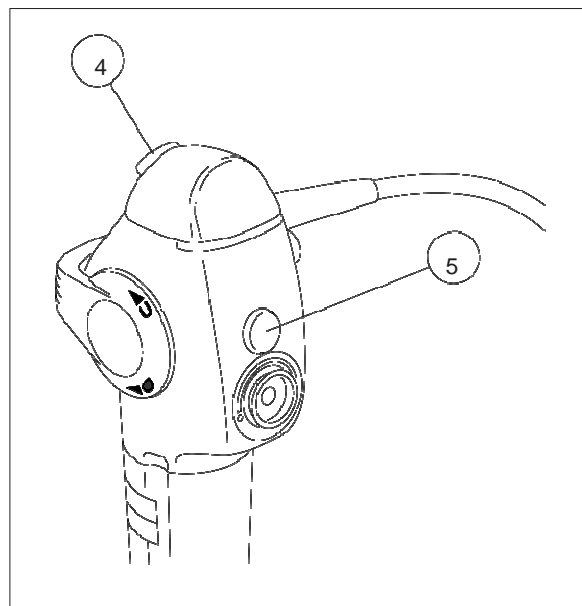

#### ⑤ Przycisk zamrożenia (freeze)

Jest to przycisk zdalny służący do unieruchomienia i przechwytywania obrazu.

Po wciśnięciu tego przycisku obraz na ekranie jest zamrożony. Zamrożenie obrazu jest anulowane kilka sekund po zwolnieniu przycisku.

Po ponownym wciśnięciu przycisku, gdy obraz wciąż jest zamrożony, sygnał wyzwalający jest wysyłany do urządzenia podłączonego do terminala drukarki.

