


<Procedura testu>

- (1) Podłącz tester szczelności LT-7F (część opcjonalna) do złącza wentylacji endoskopu.

[Uwaga]

Wyrównaj wycięcie "a" złącza wentylacji endoskopu z wskaźnikiem "b" złącza testera szczelności powietrza, a następnie wciśnij złącze testera szczelności i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować tester szczelności powietrza do złącza wentylacji.

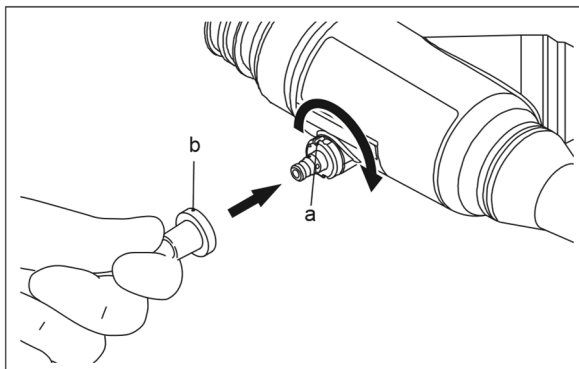


[Uwaga]

Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi testera szczelności.



- (2) Naciśnij mocno przycisk spustowego testera szczelności, aby napędnąć powietrze pod ciśnieniem.
- (3) Ściskaj pompkę testera, aby wprowadzić powietrze do endoskopu, do momentu, aż wskaźnik testera wskaże 20 kPa.

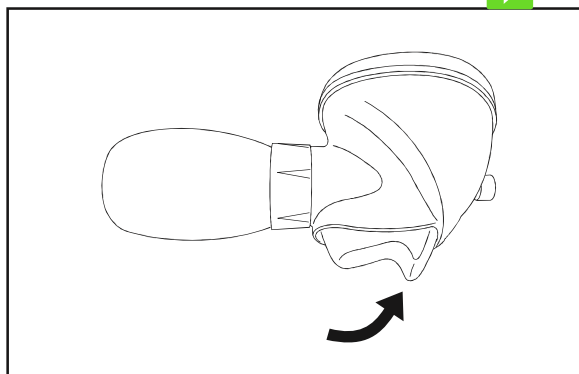


[Uwaga]

Zwolnij palec ze spustu, aby nie pociągnąć za spust.

- (4) Pozostaw tester na 30 sekund i sprawdź, czy wskazanie nie opada.

Jeśli zmiana wskazania wynosi 5 kPa lub więcej (10 podziałek lub więcej), szczelność endoskopu jest niewystarczająca.

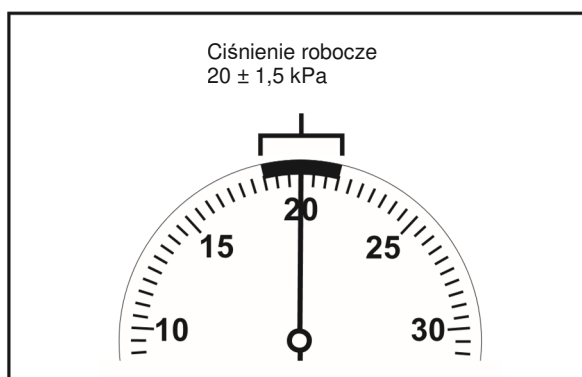

[Uwaga]

Jeśli szczelność jest niewystarczająca, nie należy czyścić endoskopu i natychmiast skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy FUJIFILM.

