

CEWNIKI DO  
HEMODIALIZY  
DŁUGOTERMINOWEJ

## INFORMACJA TECHNICZNA

NR KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁ. DO MUFKI	DŁ. CAŁ.	OPIS	Priming Vol A	Priming Vol V	SZT. W OP.
KFE-HDL-1216-K	12	16	21	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.00	1.10	10
KFE-HDL-1219-K	12	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.05	1.10	10
KFE-HDL-1419-K	14	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.55	1.60	10
KFE-HDL-1423-K	14	23	28	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.65	1.70	10
KFE-HDL-1427-K	14	27	32	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.00	2.10	10
KFE-HDL-1431-K	14	31	36	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.00	2.10	10
KFE-HDL-1435-K	14	35	40	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.30	2.40	10
KFE-HDL-1450-K	14	50	55	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.35	2.40	10
KFE-HDL-1619-K	16	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.70	1.80	10
KFE-HDL-1623-K	16	23	28	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	1.90	2.00	10
KFE-HDL-1627-K	16	27	32	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.10	2.25	10
KFE-HDL-1631-K	16	31	36	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.25	2.50	10
KFE-HDL-1635-K	16	35	40	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.50	2.70	10
KFE-HDL-1650-K	16	50	55	Long term haemo stepped tip dual lumen catheter kit	2.75	3.05	10
KFE-HDL-1216-PCK	12	16	21	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.00	1.10	10
KFE-HDL-1219-PCK	12	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.05	1.10	10
KFE-HDL-1419-PCK	14	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.55	1.60	10
KFE-HDL-1423-PCK	14	23	28	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.65	1.70	10
KFE-HDL-1427-PCK	14	27	32	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.00	2.10	10
KFE-HDL-1431-PCK	14	31	36	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.00	2.10	10
KFE-HDL-1435-PCK	14	35	40	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.30	2.40	10
KFE-HDL-1450-PCK	14	50	55	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.35	2.40	10
KFE-HDL-1619-PCK	16	19	24	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.70	1.80	10
KFE-HDL-1623-PCK	16	23	28	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	1.90	2.00	10
KFE-HDL-1627-PCK	16	27	32	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.10	2.25	10
KFE-HDL-1631-PCK	16	31	36	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.25	2.50	10
KFE-HDL-1635-PCK	16	35	40	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.50	2.70	10
KFE-HDL-1650-PCK	16	50	55	Long term haemo stepped tip dual lumen pre curved catheter kit	2.75	3.05	10

\*Length in cm

## ZESTAW ZAWIERA

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1x Cewnik                                       | 1x 10ml strzykawka                  |
| 1x 18g x 7cm igła intoduktora z zaworem bocznym | 1x Skalpel 11                       |
| 1x 0.035"x70cm nityniowa prowadnica typu J      | 2x Nakrętki wtryskowe               |
| 2x Rozszerzacz naczyniowy                       | 1x Bezszywowe urządzenie mocujące   |
| 1x Rozrywalna koszulka typu Peel Away           | 2x Opatrunek na ranę                |
| 1x Sztylet do tunelizacji                       | 1x Naklejka identyfikująca pacjenta |




Unifix

## INFORMACJA TECHNICZNA

NR KAT. OPIS

UNIFIX Samoprzylepne bezszwowe urządzenie mocujące

Tests done on extracorporeal circuit with fluid having same viscosity (3.5 cP at 37°C) of blood.

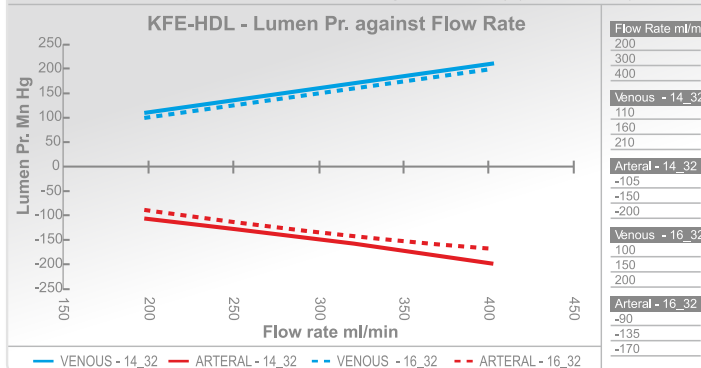

Gama cewników Kflow Epic Haemo jest udoskonalana od dawna jako długoterminowy dostęp do hemodializ. Biokompatybilna konstrukcja, karbotanowego cewnika jest kluczem do zapewnienia doskonałej wytrzymałości, elastyczności i odporności na załamania. Dostępne w wersji prostej i wstępnie zakrzywionej najlepsze konfiguracje w różnych rozmiarach (FR) i długościach (CM), aby zaspokoić potrzeby pacjentów i lekarzy.

#### CECHY I ZALETY

- Dostępne w wersjach 12, 14 i 16 FR, aby umożliwić lekarzom wybrać optymalny rozmiar dla pacjenta.
- Specjalnie zaprojektowana konfiguracja końcówki w celu zmniejszenia recyrkulacji.
- Okrągły cewnik umożliwia łatwe wprowadzenie, obsługiwany tradycyjną zmodyfikowaną techniką zakładania metodą Seldingera.
- Cewnik dostępny w wersji prostej lub wstępnie zakrzywionej w podejściu szyjnym dla wygody pacjenta.
- Prowadnik nitinolowy minimalizuje ryzyko zagięcia, umieszczony w podajniku umożliwiającym płynne wprowadzenie jedną ręką. Przekrój PODWÓJNE D, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie co zapewnia stabilność i wytrzymałość cewnika przy zachowaniu równomiernego przepływu i ciśnienia.
- Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich materiał karbotanowy jest odporny na rozpuszczalniki i wszystkie główne produkty na bazie jodu i alkoholu i inne rozwiązania czyszczące.
- Objętość napełniania podana na ramionach cewnika
- Oznaczone kolorami zaciski i luery zapewniają łatwą identyfikację i kontrolę przepływu

A złącza typu luer oznaczone kolorami

B Łatwo rozpoznawalne, oznaczone kolorami zaciski i drukowane przedłużenia

C Miękkie wejście i obrotowe skrzydełko maksymalizują komfort pacjenta

D mankiet służący do optymalnej granulacji tkanki i zabezpieczenia cewnika

Elastyczny, odporny na załamania prowadnik Nitinolowy

E Miękka, schodkowa konstrukcja końcówki cewnika ułatwia płynne wprowadzenie i zmniejsza szybkość recyrkulacji

©2014 Kimal plc. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Kimal plc. Specification: Kimal plc reserves the right to change the specification of its products at any time. Registered address: Kimal plc, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.

**KIMAL**  
delivering healthcare innovation

Kimal  
Unit 401, Pointon Way, Stonebridge  
Cross Business Park, Droitwich Spa,  
Worcestershire WR9 0LW  
Tel: +44 (0)845 437 9542  
Fax: +44 (0)845 437 9544  
www.kimal.co.uk

Kimal GmbH  
Hamburger Str.26,  
41540 Dormagen,  
Germany,  
Tel +49 (0)2133 285 141,  
Fax +49 (0)2133 285 1420,  
www.kimal-med.de

Kimal International Healthcare FZE  
SAIF - Zone  
PO Box 8532, Sharjah  
United Arab Emirates  
Tel: +97 16552 8146,  
Fax: +97 16552 8147  
mea@kimal.co.uk

Unifix

Dystrybutor:



**optimed** pro-office

ul. Forteczna 5, bud. Fort nr 47a, 32-086 Węgrzce k/Krakowa  
tel. +48 12 417 30 70, fax. +48 12 411 44 44  
e-mail: optimed@optimedpro-office.eu  
www.optimedpro-office.eu