

System dozowników B. Braun do chusteczek

Elastyczne i praktyczne w użyciu



Nowe ECO
chusteczki

Instrukcja przygotowania systemu
dozowników B. Braun oraz ich użycia

Napełnianie


system dozowników B. Braun na chusteczki do dezynfekcji powierzchni




Nasze systemy dozowników dostarczane są w czystych warunkach. Mycie oraz dezynfekcja przed pierwszym użyciem nie jest wymagane. Napełniać tylko całkowicie suche, czyste, zdezynfekowane i nieuszkodzone dozowniki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia, np. zakurzenia lub zapylenia w trakcie przechowywania lub transportu zalecamy czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z podaną instrukcją. Jeżeli to konieczne, w czasie napełniania używać rękawic i okularów ochronnych.




Wyjąć rolkę chusteczek z opakowania i włożyć do dozownika. Wyciągnąć chusteczkę z wewnętrznej części rolki. Przygotować świeżą substancję do nawilżania chusteczek zgodnie z zaleceniami producenta.

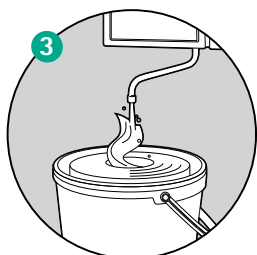

Okrężnymi ruchami namoczyć rolkę znajdującą się w dozowniku wystarczającą ilością środka dezynfekcyjnego; tylko wtedy zapewniamy całkowite nawilżenie chustek w dozowniku. Rekomendowana ilość środka dezynfekcyjnego opisana jest na etykiecie. Rolka jest całkowicie nawilżona po 10 minutach.¹

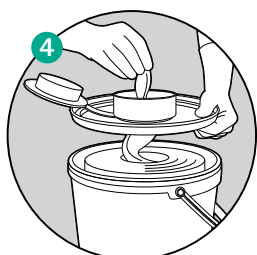

Przeciągnąć pierwszą chusteczkę przez otwór pokrywy dozownika. Zamknąć szczelnie pokrywę i usunąć pierwszą chusteczkę. Zamknąć kapsel zabezpieczający.

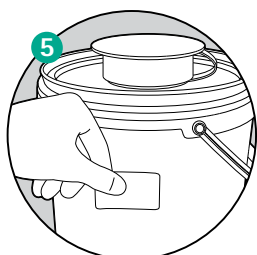

Uzupełnić dane na naklejce i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu na dozowniku. Termin przydatności przygotowanych chusteczek wynosi 28 dni. Szczegółowe informacje zamieszczone są w broszurach stosowanych produktów.


¹ Więcej informacji dot. minimalnego stężenia substancji dezynfekującej można znaleźć w tabeli „Kompatybilne produkty do czyszczenia i dezynfekcji B. Braun” na str. 4. Środki do dezynfekcji należy przygotować bezpośrednio przed użyciem, w czystym i suchym naczyniu, zgodnie z instrukcją wytwórcy. Wybrane zastosowane stężenia muszą być aktywne co najmniej przez 1 godzinę zgodnie z listą VAH.

Przygotowanie i ponowne napełnianie


dozowników B. Braun na chusteczki

System dozowników może być napełniany i używany ponownie, kiedy wszystkie chusteczki zostały zużyte lub wygaśł termin przydatności do użycia środka czynnego. Przed ponownym napełnieniem dozownika powinno się przeprowadzić mycie ręczne (spłukiwanie gorącą wodą, o temp. 55°–60°C, lub przez wytarcie chusteczką z odpowiednią substancją myjącą) oraz dezynfekcję,


włączając w to pokrywę oraz kapsel dozownika. Alternatywnie można zastosować automatyczne mycie oraz dezynfekcję. Do przygotowania dozowników B. Braun rekomendujemy systemy opisane poniżej. Zgodnie z publikacjami VAH² zalecane jest randomizacja próbek dozowników oraz ich zawartości celem wczesnej identyfikacji zanieczyszczeń.

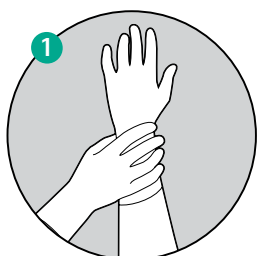


Jeżeli to konieczne, założyć rękawice oraz okulary ochronne. Do czyszczenia i dezynfekcji dozowników B. Braun rekomendujemy użycie Meliseptol® rapid oraz chusteczki Meliseptol® HBV

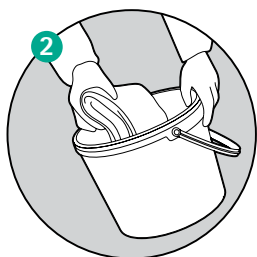

Aby **umyć** dozownik prawidłowo, należy usunąć pozostałe chusteczki oraz resztki substancji czynnej. Przetrzeć do czysta wszystkie powierzchnie, włączając w to wiaderko, pokrywę oraz kapsel. Używać nietkanej, niestrzępiącej się ściereczki, namoczonej w dezynfekcyjnym środku alkoholowym.

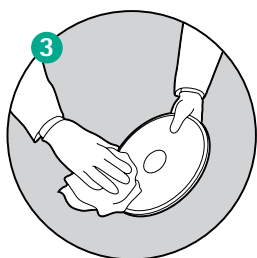

Przed przeprowadzeniem dezynfekcji wszystkie powierzchnie muszą być wizualnie czyste i suche. Do **dezynfekcji** powierzchni, włączając wiaderko, pokrywę oraz kapsel, użyć nietkanej, niestrzępiącej się ściereczki. Przestrzegać czasu ekspozycji środka dezynfekującego.

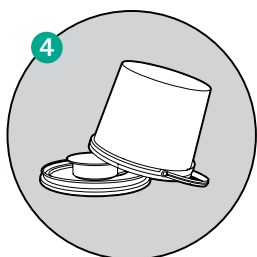

Wysuszyć wszystkie elementy dozownika przed ponownym złożeniem. Następnie dozownik może być ponownie napełniony zgodnie instrukcją z poprzedniej strony.



² Publikacja VAH: Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortranksystem für die Flaschendesinfektion. HygMed 2012; 37(11).

System dozowników i chusteczek BBraun

Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach, centrach medycznych i domach opieki.

B. Braun Wipes ECO/Wipes mini ECO

NOWOŚĆ

- Chusteczki dobrej jakości – (50 g / m²)
- Wykonane z politereftalanu etylenu – nie strzępią się
- Rozciągliwe poprzecznie dzięki specjalnej strukturze
- Ekologiczne i ekonomiczne – 20% więcej chusteczek dzięki nowej tkaninie
- B. Braun Wipes ECO 120 sztuk (19cm x 36cm)
- B. Braun Wipes ECO mini 60 sztuk (15cm x 20cm)

Nazwa	Stężenie minimalne	Czas ekspozycji
Hexaquart® plus	0.5 %	60 min.
Hexaquart® plus lemon fresh	0.5 %	60 min.
Melsept® SF	1.0 %	60 min.
Meliseptol® rapid	roztwór stężony	1 min.
Meliseptol® Foam pure	roztwór stężony	1 min.
Meliseptol® New Formula	roztwór stężony	1 min.

NOWOŚĆ

System dozowników BBraun z chusteczkami Wipes ECO/mini Wipes ECO:	Nr katalogowy
Pojemnik na chusteczki suche Wipes ECO	19162
Chusteczki suche Wipes ECO , 120 sztuk, 190mm x 360mm	19726
Pojemnik na chusteczki suche mini Wipes ECO	19182
Chusteczki suche mini Wipes ECO , 60 sztuk, 150mm x 200mm	19725