



DEZYNFEKCJA
POWIERZCHNI

B. Braun Wipes ECO

PRAKTYCZNE CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

B. Braun Wipes ECO

PRAKTYCZNE CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie i dezynfekcja małych powierzchni w szpitalach i innych jednostkach związanych z branżą medyczną
- Możliwość użycia w branży usługowej i pielęgnacyjnej

PRZEZNACZENIE

System pojemników i chusteczek (suchych) do samodzielnego przygotowania chusteczek nasączonych roztworem dezynfekcyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra jakość materiału: gramatura 50 g / m²
- Wykonane z politereftalanu etylenu – nie strzępią się
- Rozciągliwe dzięki specjalnemu splotowi i strukturze materiału
- Ekologiczne i ekonomiczne – mniejsza objętość chusteczek przy zachowanej wydajności – dzięki nowej tkaninie
- Bezpieczne zamknięcie – klik sygnalizuje domknięcie opakowania

PRODUKTY DO NASĄCZANIA CHUSTECZEK

Produkt do nasączania	Stężenie min.	Czas ekspozycji
Hexaquant®	2% / 1%	5 min. / 15 min.
Hexaquant® pure	1% / 0.5%	5 min. / 30 min.
Meliseptol® rapid	roztwór stężony	1 min.
Meliseptol® Foam pure	roztwór stężony	1 min.
Meliseptol® New Formula	roztwór stężony	1 min.



Dostępne opakowania	Nr kat.
Pojemnik na chusteczki suche Wipes ECO	19726
Chusteczki suche Wipes ECO , 120 sztuk, 190mm x 360mm	19873
Pojemnik na chusteczki suche mini Wipes ECO	19725
Chusteczki suche mini Wipes ECO , 60 sztuk, 150mm x 200mm	19874

SPOSÓB UŻYCIA

Napełnianie pojemnika – pierwsze użycie



Założyć rękawice i okulary ochronne. Przed pierwszym użyciem nie jest wymagane czyszczenie (system jest fabrycznie czysty). Napełniać tylko nieuszkodzone dozowniki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia, dezynfekować zgodnie z podaną instrukcją.




Wyjąć rolę chusteczek z opakowania i włożyć do dozownika. Wyciągnąć chusteczkę z wewnętrznej części rolki. Przygotować roztwór do nasączenia chusteczek.



Równomiernie nasączyć rolę znajdującą się w dozowniku odpowiednią ilością środka dezynfekcyjnego. Rekomendowana ilość środka dezynfekcyjnego podana jest na etykiecie. Czas nasączania rolki wynosi 10 min.



Przeciągnąć pierwszą chusteczkę przez otwór pokrywy dozownika. Nałożyć szczelnie pokrywę i usunąć pierwszą chusteczkę. Zamknąć.

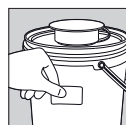

Uzupełnić dane na naklejce, przykleić ją na dozowniku. Termin przydatności przygotowanych chusteczek wynosi 28 dni. Szczegółowe informacje zamieszczone są w broszurach użytych produktów.

Przygotowanie pojemnika – ponowne użycie

Dozowniki mogą być napełniane wielokrotnie. Przed ponownym napełnieniem dozownika należy przeprowadzić:

- mycie: wodą o temp. 55°-60°C lub przetrzeć chusteczką
- dezynfekcję, w tym dezynfekcję pokrywy i zamknięcia dozownika.

Alternatywnie można zastosować automatyczne mycie oraz dezynfekcję




Założyć rękawice oraz okulary ochronne. Do czyszczenia i dezynfekcji dozowników rekomendujemy użycie Meliseptol rapid lub chusteczki Meliseptol HBV.



Przed myciem usunąć pozostałe chusteczki oraz pozostałości roztworu nasączającego. Oczyszczyć wszystkie powierzchnie dozownika, w tym pokrywę oraz zamknięcie. Użyć niestrzępiących się chusteczek.



Przed dezynfekcją wszystkie powierzchnie muszą być czyste i suche. Do dezynfekcji dozownika, w tym pokrywy i zamknięcia, użyć niestrzępiących się chusteczek. Przestrzegać czasu ekspozycji.

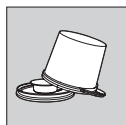

Wysuszyć elementy dozownika przed ponownym złożeniem. Następnie napełnić zgodnie z instrukcją napełniania (powyżej).