

Napisy na etykiecie dwukrotnie przylepnej bez wskaźnika sterylizacji:

- Data sterylizacji
- Data ważności

Napisy na etykiecie dwukrotnie przylepnej ze wskaźnikiem sterylizacji:

- Oznaczenie metody sterylizacji i wskaźnik sterylizacji (STEAM - para wodna, EO - tlenek etylenu)
- Prawidłowa zmiana barwy wskaźnika sterylizacji:
 - para wodna - z niebieskiej na czarną/ciemno brązową
 - tlenek etylenu - z niebieskiej na zieloną
- Data sterylizacji
- Data ważności

Wymiary etykiety:

- 22 mm x 29 mm

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu.


Termin ważności:

- Dwa lata, umieszczony na opakowaniu zbiorczym.

Sposób użycia:

- Na przygotowane do sterylizacji pakiety, za pomocą metkownicy nakleja się jedną etykietę dwukrotnie przylepną (na jeden dowolny reprezentatywny pakiet kontrolny dla danego wsadu nakleja się dwie etykiety) z naniesionymi informacjami (inicjały osoby obsługującej sterylizator, numer sterylizatora, numer kolejny wsadu w ciągu dnia, zakodowana cyfrowo zawartość pakietu, data przeprowadzonej sterylizacji, data ważności wysterylizowanego pakietu).
- Po zakończeniu sterylizacji, jedną z etykiet z reprezentatywnego pakietu kontrolnego należy oderwać i nakleić na kopertę z dokumentacją kontrolną sterylizatora, w którym przeprowadzono proces sterylizacji.
- Reprezentatywny pakiet kontrolny z drugą etykietą oraz pozostałe pakiety z danego wsadu można wydać użytkownikowi, a pozostawiona etykieta w dokumentacji sterylizatorni (wraz z innymi testami, dokumentami) informuje, że proces sterylizacji odbył się i był przeprowadzony prawidłowo.

Metkownica i etykiety ECO dwukrotnie przylepne

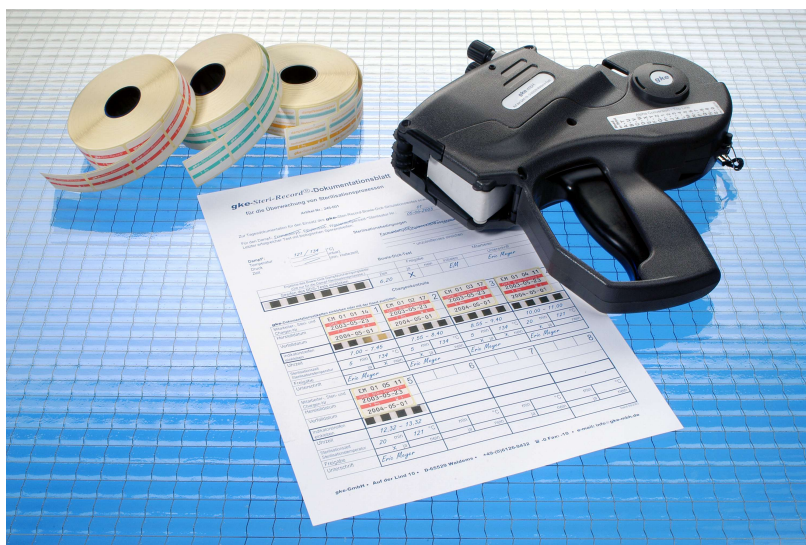

Metkownica

Metkownica jest przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji. Posiada ergonomiczny kształt i jest wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Umożliwia nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie. Drukowane dane są rozmieszczone w trzech rzędach po dwanaście znaków w każdym rzędzie. Zapis informacji na etykietach odbywa się wzdłuż przesuwu etykiet.

Metkownica posiada możliwość druku liter i cyfr we wszystkich pozycjach pierwszego rzędu. W pozostałych dwóch rzędach drukowane są znaki cyfrowe.

W celu poprawnego druku liter niezbędne jest sprawdzenie sposobu ustawienia liter na głowicy drukującej, w tabeli znaków naklejonej na metkownicy.

Etykiety ECO dwukrotnie przylepne

Etykiety ECO dwukrotnie przylepne służą do dokumentowania procesów sterylizacji w działach centralnych i podręcznych (lokalnych) sterylizatorni.

Dostarczane są w postaci rolek z etykietami na podłożu taśmy papierowej - ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu lub bez wskaźnika sterylizacji.

Umieszczone wskaźniki (klasa I wg normy PN-EN ISO 11140-1) umożliwiają rozróżnienie pakietów przed i po sterylizacji.

Etykiety ECO cechują się możliwością naklejania, a następnie oderwania wierzchniej warstwy i ponownego jej przyklejenia w innym miejscu (są dwukrotnie przylepne).

Każdy pakiet musi być oklejony etykietą w celu umożliwienia wstecznego prześledzenia postępowania z pakietem na podstawie parametrów procesu udokumentowanych w centralnej sterylizatorni.

Na etykietach ECO można umieszczać zakodowane informacje alfanumeryczne w trzech rzędach po 12 znaków w każdym.

Trzy rzędy - pola etykiet przeznaczone są do nanoszenia następujących informacji:

- pierwszy rząd: inicjały osoby obsługującej sterylizator (odpowiedzialnej za sterylizację), numer sterylizatora, numer kolejny wsadu sterylizatora w ciągu dnia, kodowana cyfrowo zawartość pakietu
- drugi rząd: data przeprowadzonej sterylizacji pakietu
- trzeci rząd: data ważności wysterylizowanego pakietu

Nazwa wyrobu	Symbol Katalogowy	Jednostka opakowaniowa	Producent
Etykiety ECO dwukrotnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji	000-863	1 opakowanie = 12 rolek (rolka = 750 szt. etykiet) + zapasowy wałek z tuszem	GKE Niemcy
Etykiety ECO dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM - para wodna	000-873	1 opakowanie = 12 rolek (rolka = 750 szt. etykiet) + zapasowy wałek z tuszem	
Etykiety ECO dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji EO - tlenek etylenu	000-875	1 opakowanie = 12 rolek (rolka = 750 szt. etykiet) + zapasowy wałek z tuszem	
Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna	240-830	1 szt.	