

PERGUT MEDICAL SLU- Isla de la Palma,
32 Nave 4, 28703 San Sebastián de los Reyes

ETYKIETY DO KONTENERA

REF: 552A

1 - WYMIARY:


CAŁKOWITE: 80 x 35 mm.

WSKAŹNIK: 0,5cm²

2 - SKŁAD:

Karton najwyższej jakości samoklejący o danych właściwościach fizycznych i chemicznych (porowatość, pH, skład,)

Nietoksyczny tusz spełnia normę ISO11140-1 dla wskaźnika Klasy A.

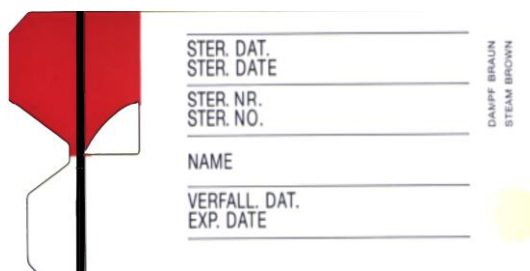

3 - ZASTOSOWANIE:

By zabezpieczyć zamknięcie kontenera przed nieautoryzowanym otwarciem i umożliwić naniesienie danych o sterylizacji. Zmiana koloru wskaźnika potwierdza, iż sterylizacja miała miejsce.

Do kontenerów Aesculap.

4 - KALIBRACJA:

Ze sterylizatorami parowymi zgodne z normą ISO 11140-1 dla wskaźników procesu Klasy A

5 - INTERPRETACJA WYNIKÓW:

Jeśli etykieta ze wskaźnikiem została poddana procesowi sterylizacji parowej (121°C - 134°C), po powrocie, wskaźnik chemiczny zmieni kolor z pierwotnego ŻÓŁTEGO na BRAZOWY.

6 - ETYKIETY I ZNACZNIKI:

Każda kontrola, w dodatku do wskaźnika, zawiera puste miejsca na umieszczenie następujących danych: N° Sterylizatora, data ważności, data sterylizacji i osoba odpowiedzialna.